

**9931 - Halo Sectional Matrix System
Original matrisband med instrumentkit**

1 x av varje *Universal Ring, Short Ring*
25 x av varje *Original matriser*
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm och 7,5 mm
25 x av varje *Wedges, kilar Extra Small, Small, Medium, och Large*
1 x *Halo Carousel, dispenser*
1 x *Tweezers, pincett* 1 x *Forceps, tång*

**9932 - Halo Sectional Matrix System
Original matrisband kit**

1 x av varje *Universal Ring, Short Ring*
25 x av varje *Original matriser*
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm och 7,5 mm
25 x av varje *Wedges, kilar Extra Small, Small, Medium, och Large*
1 x *Halo Carousel, dispenser*

**9933 - Halo Sectional Matrix System
Original matrisband minikit**

1 x av varje *Universal Ring, Short Ring*
5 x av varje *Original matriser*
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm och 7,5 mm
5 x av varje *Wedges, kilar Extra Small, Small, Medium, och Large*
1 x *Halo Carousel, dispenser*

Halo kilar	100 st	
Extra Small	5884	NY
Small	5042	
Medium	5043	
Large	5044	

Halo ringar	1 st	2 st	
Universal	5008	5009	
Short	5882	5883	NY

5047 - Halo Forceps tång 1 st



5048 - Halo Tweezers pincett 1 st



**9935 - Halo Sectional Matrix System
Firm Nonstick matrisband kit**

1 x av varje *Universal Ring, Short Ring*
20 x av varje *Firm matriser*
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, and 7,5 mm
25 x av varje *Wedges, kilar Extra Small, Small, Medium, och Large*
1 x *Halo Carousel, dispenser*


9936 - Halo Sectional Matrix System Firm matrisband kit

1 x av varje *Universal Ring, Short Ring*
20 x av varje *Firm matriser*
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, and 7,5 mm
25 x av varje *Wedges, kilar Extra Small, Small, Medium, och Large*
1 x *Halo Carousel, dispenser*

Halo Original matriser	50 st	100 st
3,5 mm	5448	5449
4,5 mm	5450	5451
5,5 mm	5452	5453
6,5 mm	5454	5455
7,5 mm	5456	5457

Halo Firm matriser	50 st	100 st
3,5 mm	5059	—
4,5 mm	5062	5063
5,5 mm	5064	5065
6,5 mm	5066	5067
7,5 mm	5068	—

Halo Firm Nonstick matriser	50 st	100 st
3,5 mm	5049	—
4,5 mm	5051	5052
5,5 mm	5053	5054
6,5 mm	5055	5056
7,5 mm	5057	—

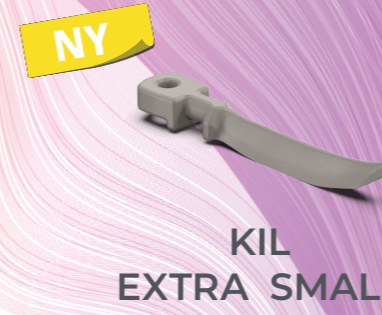

**Fantastiska resultat
på kortare tid**

Med det lätthanterliga sektionssystemet Halo kan du skapa vackra, anatomiskt formade kompositrestorationer på kortare tid.¹



HALO™

SECTIONAL MATRIX SYSTEM

Halo-systemet ger anatomiskt utformade konturer så du kan ägna mindre tid åt att forma och finishera din restauration.¹ Och det ger genomgående täta kontakter vilket bidrar till att garantera att dina restaurationer får den livslängd både du och din patient förväntar er.

Maximal tandseparation uppnås genom kraften från nitinolringen. Denna optimala separation gör det möjligt att enkelt restaurera en enskild tand eller utföra back-to-back-restaurationer.

Den anatomiskt konturerade designen hos Halo-ringen, i kombination med den anpassning som uppnås med hjälp av kilarna, gör att matrisbandet kan adaptera fullständigt till preparationen från den gingivala marginalen till randvulsten. Detta bidrar också till att bibehålla bandets form även vid stora preparationer och hjälper dig att konsekvent uppnå anatomiskt korrekt utformade restaurationer.

När dina restaurationer har idealiska kontakter och en anatomisk böjning kommer du att se att tidsåtgången för formning och finishering minskar.¹ Halo-systemet fungerar så för alla restaurationer.



Halo sektionssystem omfattar nitinolringar, matrisband i rostfritt stål och kilar. Varje komponent är utformad för att tillsammans skapa oföränderliga, anatomiskt formade restaurationer.

NY



NITINOL-RINGAR

- Ny kort ring ger samma separation med bättre passform på korta kliniska kronor
- Superelastisk nitinolmetall behåller styrkan under behandlingen och reducerar cyklisk utmattnings
- Ringarna håller för över 1000 användningar¹
- De glasfyllda nylonklorna är motståndskraftiga och faller inte ihop i preparationen och skapar underkonturerade restaurationer
- Ringens utformning håller matrisbandet i en naturlig och anatomisk form, hjälper till att eliminera överskott och minskar finisheringsarbetet
- Stapelbar design möjliggör användning för mod-fyllningar och andra klass II-restaurationer
- Ger idealisk separation för "back-to-back"-restaurationer (två angränsande approximala fyllningar)

MATRISBAND

- Anatomiskt utformade för idealiska kontakter
- Böjningen vid randvulsten ger en idealisk okklusal form i övergången till approximalytan vilket minskar finisheringen
- Hål för pincetten i matrisbandet för lätt placering
- Böjbar flik förenklar placering och borttagning med ökad visibilitet
- Kan väljas med beläggning för enkel identifiering (teflonskiktets tjocklek 0,013 mm)
- Original matrisband kan anpassas och formas mer, Firm matrisband motstår deformation och är idealiska då det interproximala utrymmet är begränsat
- Original och Firm matrisband består av ultratunt 0,038 mm rostfritt stål

NY



KILAR

- Ny extra liten kil
- Den fasta kilen är mindre traumatisk för papillen
- Konkav design gör kilarna lättplacerade och stapelbara i fall där flera kilar behövs
- Lätt åtskiljda färger markerar kilarnas storlek
- Mittleden kan manipuleras för anatomisk anpassning av matrisbandet



CAROUSEL DISPENSER

- Håll ordning med den unika lättanvända karusell-dispensern
- Slut på utspridda matrisband och kilar efter att de råkat falla, något som sparar tid och frustration
- Kan lätt desinficeras med ett ytdesinfektionsmedel

Kliniska foton med tillstånd från Dr Jaleena Fischer-Jessop, Chief Clinical Officer vid Ultradent Products, Inc.




Före behandling



Preparation med Halo-systemet



Efter behandling med Transcend komposit, Universal Body

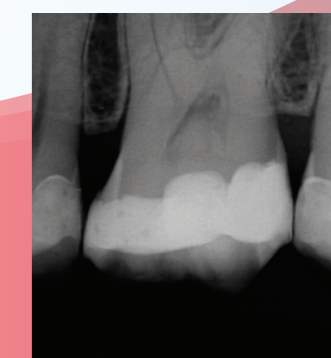

Röntgenbild efter behandling

Kliniska foton med tillstånd från Dr James Wright, Clinical Advisor vid Ultradent Products, Inc



Före behandling



Preparation med Halo-systemet



Efter behandling

Kliniska foton med tillstånd från Dr James Wright, Clinical Advisor vid Ultradent Products, Inc



Före behandling



Preparation med Halo-systemet



Efter behandling