


Your Practice is *our* inspiration.™

Seal-Tight | Torr luft på sekunder. Vatten när *du* vill ha det.

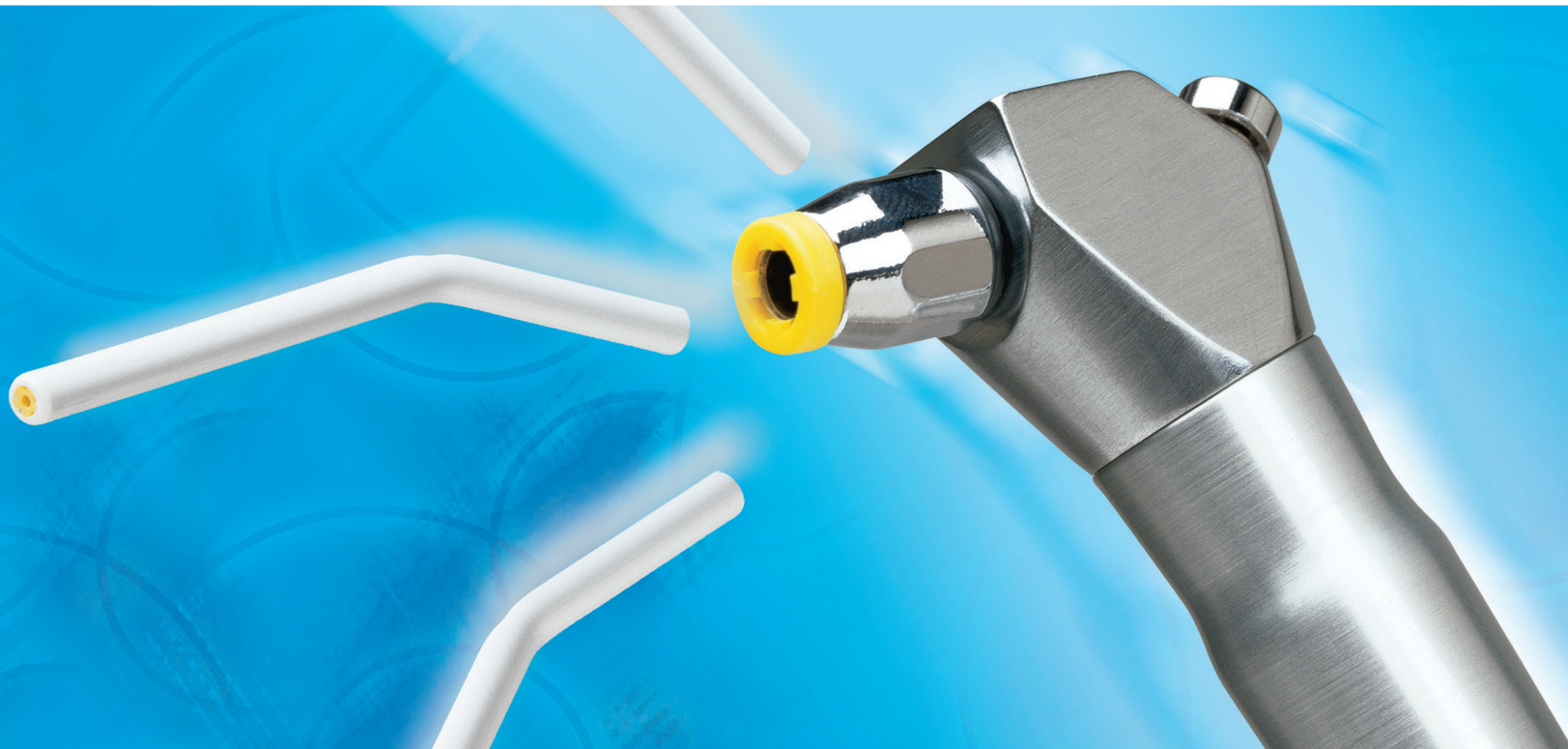

Seal-Tight

Engångsspetsar för luft/vattenbläster.



Seal-Tight ger dig torr luft omedelbart och varje gång för bästa kliniska resultat. Inga extra blås för att få bort vatten som blivit kvar i spetsen. Givetvis engångsspetsar för att förhindra korskontaminering. Maximal säkerhet. Optimal hantering.

- Torr luft direkt - inga testblås för att få bort kvarvarande vatten
- Engångsspetsar - ingen korskontaminering
- Spetsar som kan böjas 90° - utan att påverka flödet
- Snabbt och enkelt - byt spets på bara 5 sekunder
- Kompatibel med alla 3-funktions luft/vattenblästrar

Seal-Tight engångsspetsar för luft/vattenbläster Infektionskontroll och torr luft omedelbart

Seal-Tight har en gul innerförslutning av gummi som verkar som en o-ring vid varje spetsbyte. Den försäkrar att du får torr luft varje gång. Seal-Tight spetsar är enkla att avlägsna och byta ut – tryck bara på den gula autolåsringen, ta bort den gamla spetsen och montera en ny. Seal-Tight ger torr luft varje gång, vilket bidrar till bästa kliniska resultat.

- Engångsspets. För maximal infektionskontroll.
- Spar tid. Reducerar väsentligt tiden jämfört med att använda autoklaverbara spetsar.
- Flexibel. Kan böjas 90° utan att påverka vattenflödet. Ger bättre ergonomi.
- Torr luft. Den gula gummiförslutningen agerar som en o-ring, vilket garanterar torr luft varje gång.

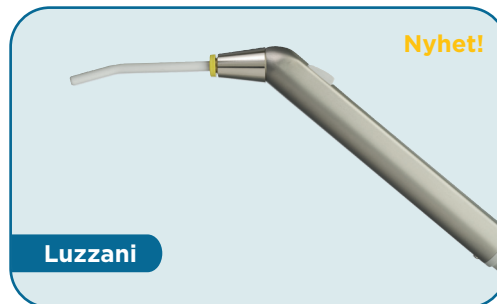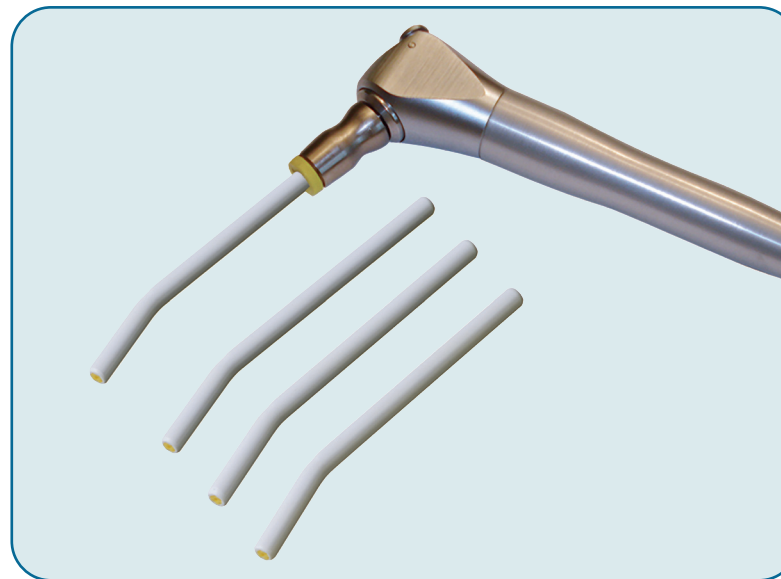

Beställning

Seal-Tight spetsar beställningsinformation

PE77500 - Bulk Box 1,500 engångsspetsar

PE77200 - Dispenser Pouch 200 engångsspetsar

Seal-Tight Adapter beställningsinformation

PE77021/A - Adapter till «A-dec»
luft/vattenbläster

PE77022/M - Adapter till «Engle/Macro»
luft/vattenbläster

PE77023/D - Adapter till «Dental-Ez»
luft/vattenbläster (tillverkad efter Jan.
1997, använd 77021)

PE77024/P - «Press Ring» luft/vattenbläster
(måste användas om luft/vattenblästern
tidigare modifierats med annan adapter)

PE77025/P - «Press Ring» luft/vattenbläster
(kan bara användas om den ursprungliga
press-ring-mekanismen är intakt)

PE77026-K Seal-Tight adapter (till KaVo luft/vatten-
bläster 773.0500/773.0510)

PE77027-L Seal-Tight adapter (till Luzzani MINI Light
luft/vattenbläster)

PE77028-S Seal-Tight adapter (till Sirona Sprayvit
4000)

Seal-Tight specifikationer:

Adapter: Avsedd för flegångsansvändning.
Autoklaveras vid 134°C, i minst 3
min.

Spetsar: Endast avsedda för engångsbruk.

PE77026-K Passar: KaVo 1058, 1065, 1066, 1080

PE77027-L Passar: Luzzani MINI light

PE77028-S Passar: Sirona Sprayvit 4000