

UNIFAST III

Självhärdande akrylat för: kronor, broar, inlägg och reparationer.

Första klassens material,
för utsökta mästerverk.



Självhärdande akrylat för temporära inlägg, kronor, broar och reparationer.

Innovativt tänkande har skapat nästa generations UNIFAST, en produkt som varit extremt populär i mer än 30 år. Nu är den här! UNIFAST III – har perfekt balans tack vare den **nydanande SURF teknologin**. Hanteringen, de fysikaliska egenskaperna och estetiken har nu nått en nivå över all förväntan.


SURF teknologi

“Surface Uniformity Revolutionary Fixation Technology”.

Den nya teknologin har gjort det möjligt att utveckla en perfekt balanserad sammansättning som har en **oöverträffad anpassningsförmåga, abrasionsresistens, hårdhet och böjhållfasthet** utan att en extra filler behövs. Fram till våra dagar har man med fillerpartiklar erhållit de ovan nämnda egenskaperna men den tekniken har samtidigt gjort delar av fillerpartiklarna inaktiva vilket gjort det omöjligt att binda dessa till resinet. Detta har också medfört att det estetiska resultatet inte blivit tillfredställande.

Genom utvecklingen av den nya SURF teknologin har GC inte bara övervunnit begränsningar vad gäller estetik utan också skapat ett resin som **är resistent mot missfärgningar**. Tack vare SURF teknologin är för första gången de polymera partiklarna täckta med ett pigment. Detta hjälper till att jämt distribuera de polymera partiklarna och pigmentet vilket i sin tur garanterar **en bläsfri och exceptionellt jämt färgade ersättningar**. UNIFAST III garanterar långtidstemporära ersättningar med jämn färg. Detta kombinerat med dess överlägsna fysikaliska egenskaper för **långtidstemporära ersättningar i samband med implantatterapi**.


Konventionell teknologi

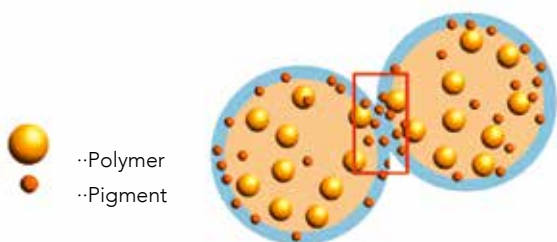

Pigmenten samlar sig i utkanterna och vilket orsakar ett fläckigt utseende.



UNIFAST III SURF Teknologi

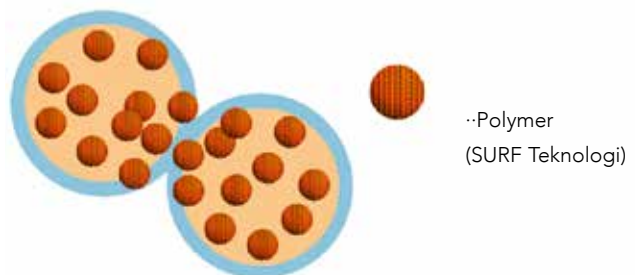

Polymer (SURF Teknologi) Polymeren är täckt med pigment vilket ger en homogen blandning.



Bilder av prover

Exemplen är gjorda med penselteknik och är observerade med genomlysningsteknik. Men konventionell teknik kan den ojämna färgen ses vid de yttre gränserna mellan varje penseldrag, medan med UNIFAST III uppvisas en exceptionellt jämn mix.

Överlägsen hantering garanteras vid både penselteknik och blandning!

Blanda & håll

UNIFAST III pulver är extremt lätt att blanda med vätska, vilket ger en mix som inte klibbar.

Med en **bekväm konsistens att arbeta med och en snabb stelningstid** som förbättrar hanteringsegenskaperna drastiskt.



Penselteknik

UNIFAST III är lämpligt att använda för snabba och enkla uppbyggnader i en färg men också för ersättningsuppbyggda med flertalet färger.

Att ta upp korrekt mängd pulver är hur enkelt som helst – det är bara att doppa penseln i vätskan. Tack vare de **optimala tixotropa egenskaperna** så bygger man steg-för-steg precis det man önskar. Du kan samtidigt också **kontrollera flytbarheten** under hela arbetsprocessen.



ZTM Bernd van der Heyd, Nuremberg, Tyskland



Applicera direkt efter att penseln doppats i blandningen ... **HÖG** Flytbarhet



Dröj en stund att applicera efter att penseln doppats i blandningen ... **LÅG** Flytbarhet



Färgskala

Med UNIFAST III kan nu skapas temporära ersättningar som ger en ärlig och **precis bild av hur det slutliga arbetet kommer att se ut**. Dagens patienter idag tycker också att det är allt viktigare att de ska känna sig bekväma med den behandling de genomgår. Ändå bättre är: med det vi nu erbjuder kommer tilltron och förtroendet till dig tandetekniker att öka.



För att möta kraven från marknaden finns UNIFAST III i **många färger**. Flertalet Vita* dentin-, emalj- och incisalfärger med **optimal translucens** som matchar den naturliga tanden är tillgängliga. De passar för de kliniska fall som kräver en högre grad av estetik. Ljusare färger finns också för patienter med blekta tänder.

SURF-teknologins fördelar upptäcker du enkelt. Färgerna är klara och transparenta och missfärgas inte. UNIFAST III är perfekt till bettskenor och guideskenor vid implantatbehandlingar. De rosa färgerna används för reparationer av proteser och reproduktion av mjukvävnad.

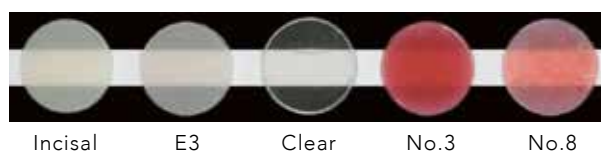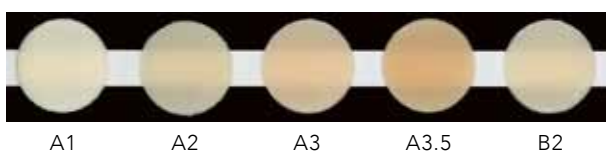

Spara tid

För att sätta pricken över i å har GC utvecklat den slutliga touchen för en snabbare och enklare arbetsprocess: **skyddslacket Optiglaze**, med vilken man erhåller en estetiskt blank yta för alla indirekta ersättningar.

Så istället för att putsa mekaniskt för att erhålla den slutliga högglansen – applicera skyddslacket med en pensel efter finishering, ljushärda med lampa under 3 minuter.

Med Optiglaze får man en **glansig yta helt jämförbar** med en vanlig slutlig polering.



ZTM Bernd van der Heyd,
Nuremberg, Tyskland

Enkelt att använda, lätt att förvara och dessutom miljövänligt.

Den praktiska förvaringslådan i plast innehåller påfyllningsbara, praktiska flaskor för pulver och vätska. Alla delar har utvecklats med tanke på miljövänlighet – från produktion till transport och till användningen i labbet.



* Vita® är ett registrerat varumärke från Vita® Zahnfabrik Bad Säckingen, Tyskland.

Vad är det som gör UNIFAST III till rätt val för ditt laboratorium?



Temporära kronor



Implantatbroar

Dentallaboratorium Xavier Laly,
Paris, Frankrike




Temporära broar



Förslutning av skruvhål

Labo Andriessens, Bryssel,
Belgien

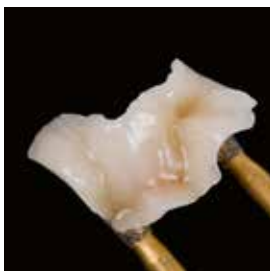

Temporära inlägg



Protesreparationer



**Reproduktion
av gingiva**



**Protetiska ersättningar
med attachments**

CEKA / PRECI-LINE attachments

UNIFAST III

Beställningsinformation



10000440	UNIFAST III, Introfp, 2-1fp, A2-A3				
10000445	UNIFAST III, Pulver 35g, A1	10000455	UNIFAST III, Pulver 100g, A1		
10000446	UNIFAST III, Pulver 35g, A2	10000456	UNIFAST III, Pulver 100g, A2	10000465	UNIFAST III, Pulver 300g, A2
10000447	UNIFAST III, Pulver 35g, A3	10000457	UNIFAST III, Pulver 100g, A3	10000466	UNIFAST III, Pulver 300g, A3
10000448	UNIFAST III, Pulver 35g, A3.5	10000458	UNIFAST III, Pulver 100g, A3.5		
10000449	UNIFAST III, Pulver 35g, B2	10000459	UNIFAST III, Pulver 100g, B2		
10000450	UNIFAST III, Pulver 35g, E3	10000460	UNIFAST III, Pulver 100g, E3		
10000451	UNIFAST III, Pulver 35g, Incisal	10000461	UNIFAST III, Pulver 100g, Incisal	10000467	UNIFAST III, Pulver 300g, Incisal
10000452	UNIFAST III, Pulver 35g, Incisal	10000462	UNIFAST III, Pulver 100g, Clear		
10000453	UNIFAST III, Pulver 35g, N°3 Rosa	10000463	UNIFAST III, Pulver 100g, N°3 Rosa		
10000454	UNIFAST III, Pulver 35g, N°8 Rosa med vener	10000464	UNIFAST III, Pulver 100g, N°8 Rosa med vener	10000468	UNIFAST III, Pulver 300g, N°8 Rosa med vener
10000441	UNIFAST III, Vätska 42ml (40g)	10000442	UNIFAST III, Vätska 104ml (100g)	10000443	UNIFAST III, Vätska 260ml (250g)
10000444	UNIFAST III, Plastlåda	10000470	GC Engångskoppar N°2, 50pcs	10000469	GC Pensel N°10



Optiglaze
Nanofyllid Ljushärdande skyddslack

15 ml flaska



G-Coat PLUS
Nanofyllid Självbondande Ljushärdande skyddslack

4 ml flaska, 20 engångskoppar,
50 mikrotip applikatorer
& 1 applikator



Metal Primer II
Adhesiv för bindning av akryl och komposit till metall

5 ml flaska, 1 pensel

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC NORDIC AB

c/o Lundin Revisionbyrå
Erik Dahlbergsgatan 11B
SE-411 26 Göteborg
Tel. +46.768.54.43.50
info.nordic@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/sv-SE>