

# En självklar trygghetskänsla. Systemhygien från Dürr Dental.

Fyra färger, fyra områden - logiskt och enkelt



Systemhygien och hygien teknik  
**I system  
fungerar  
det bäst!**  
från Dürr Dental

TRYCKLUFT  
SUGSYSTEM  
BILDGIVNING  
TANDVÅRD  
HYGIEN

# Den bästa känslan är när du kan lita på ett system

Redan 1965 utvecklade Dürr Dental det första desinfektionsmedlet för suganläggningar med Orotol®. Det var startskottet för vår kontinuerliga kompetensutveckling inom hygienområdet. Idag förlitar sig tandläkare i hela världen på Dürr Systemhygien, som skyddar deras mottagningar på många sätt.


## Rådgivning

- Fortbildning, utbildning och rådgivning på plats
- Expertkunskaper från kvalificerade utbildare
- Lösningorienterade praktiska tips individuellt anpassade för mottagningar
- Hjälper med uppbyggnad av ett kvalitetssäkringssystem



## Service

- Professionell och lösningorienterad produktrådgivning
- Aktuellt informationsutbud på internet

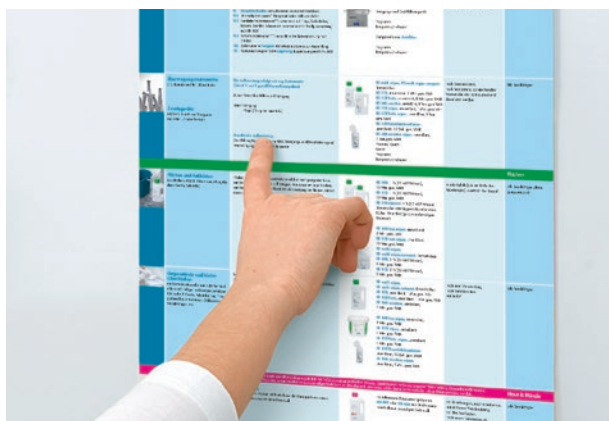

## Dürr Systemhygien




## Kvalitet

- Hög tillverkningskvalitet – Made in Germany
- Säkerhet genom inarbetade och kontrollerade processer
- Lång erfarenhet som tillverkare av desinfektions- och rengöringsmedel



Förutom produkter från Dürr Systemhygien erbjuder vi dig ett omfattande produktprogram, som din personal har nytta av i det dagliga arbetet. Vår rådgivning på plats är en direkt hjälp för din personal. Vår service hjälper dig vid frågor om våra produkter. Och kvaliteten håller toppklass tack vare flera decenniers erfarenhet och ständigt nya innovationer som orienterar sig efter de praktiska behoven.

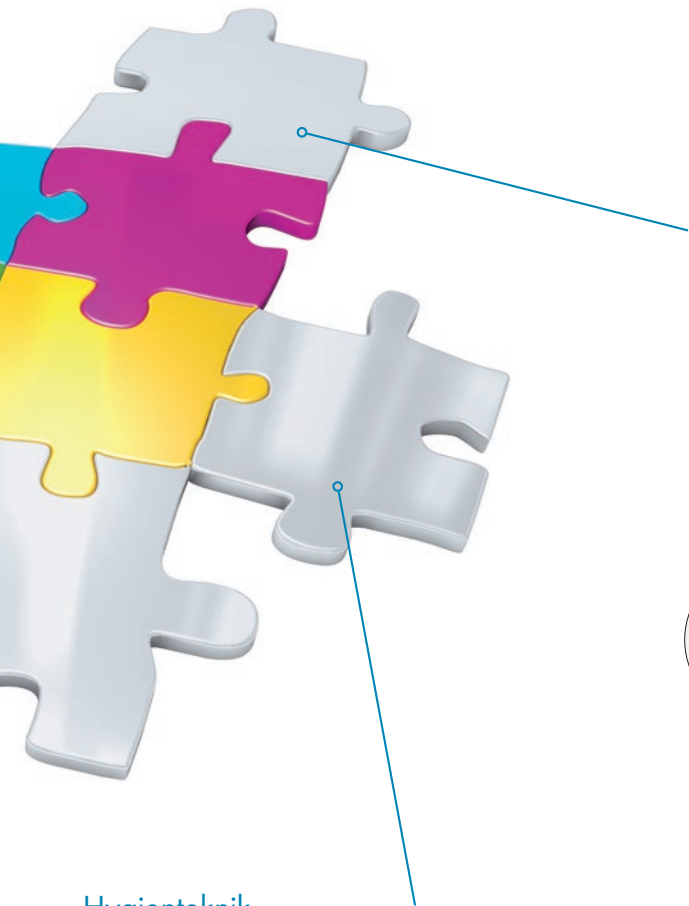

## Användarorientering

- Enklare användningshjälp genom Dürr Systemhygien med färgsystem
- Karakteristisk och smidigt lagringsbar 2,5 l-flaska från Dürr Systemhygien
- Enkel hantering av produkterna tack vare ergonomisk flaskform
- Appliceringshjälp för optimal dosering



## Hygienteknik

- Mer än 75 års erfarenhet inom medicinteknik
- Oslagbart: tekniska lösningar i kombination med rengörings- och desinfektionslösningar från Dürr Dental
- De materialskonande och verksamma produkterna har imponerande enkel hantering och snabbhet vid användning



## Fyra färger - fyra områden

- Blå för instrument Sida 06
- Grön för ytor Sida 12
- Rosa för hud och händer Sida 16
- Gul för specialområden Sida 18

# Det bästa är när allt har ett system

Vid infektionsskydd, desinfektion och rengöring får ingenting lämnas åt slumpen. Därför har vi genom många tester visat att alla preparat uppfyller kraven som är avgörande vid den praktiska användningen.

## Säker

- Omfattande inverkansspektrum: baktericid, fungicid, tuberculocid, virucid
- Kontrollerad, tillförlitlig verkan
- Alla produkter är VAH-listade och motsvarar EN-standard
- Hög desinfektions- och rengöringskraft

## Vår rekommendation för din mottagning:



HD 410  
Handdesinfektion

HD 435  
Tvättlotion



FD 366 sensitive  
Desinfektion av känsliga ytor

FD 360  
Rengöring och vård av konstläder



FD 366 sensitive wipes



FD 322  
Snabbdesinfektion



FD 333 wipes  
Desinfektionsservetter



## Skonsam


- Överlägsen kombination av verksamma ämnen
- Extra skonsamma och vårdande för huden
- Mycket skonsam mot material, rekommenderas av ledande enhetstillverkare
- Kliniskt testad
- Biologiskt nedbrytbar

## Bekväm

- Enkel och effektiv hantering
- Praktiska, enhetliga förpackningsstorlekar
- Rengöring enligt plan
- Dosering i lock
- Mycket ekonomisk användning

## Snabb

- Korta verkningstider
- Torkar snabbt utan att lämna rester
- Praktisk användning
- Enkel dosering

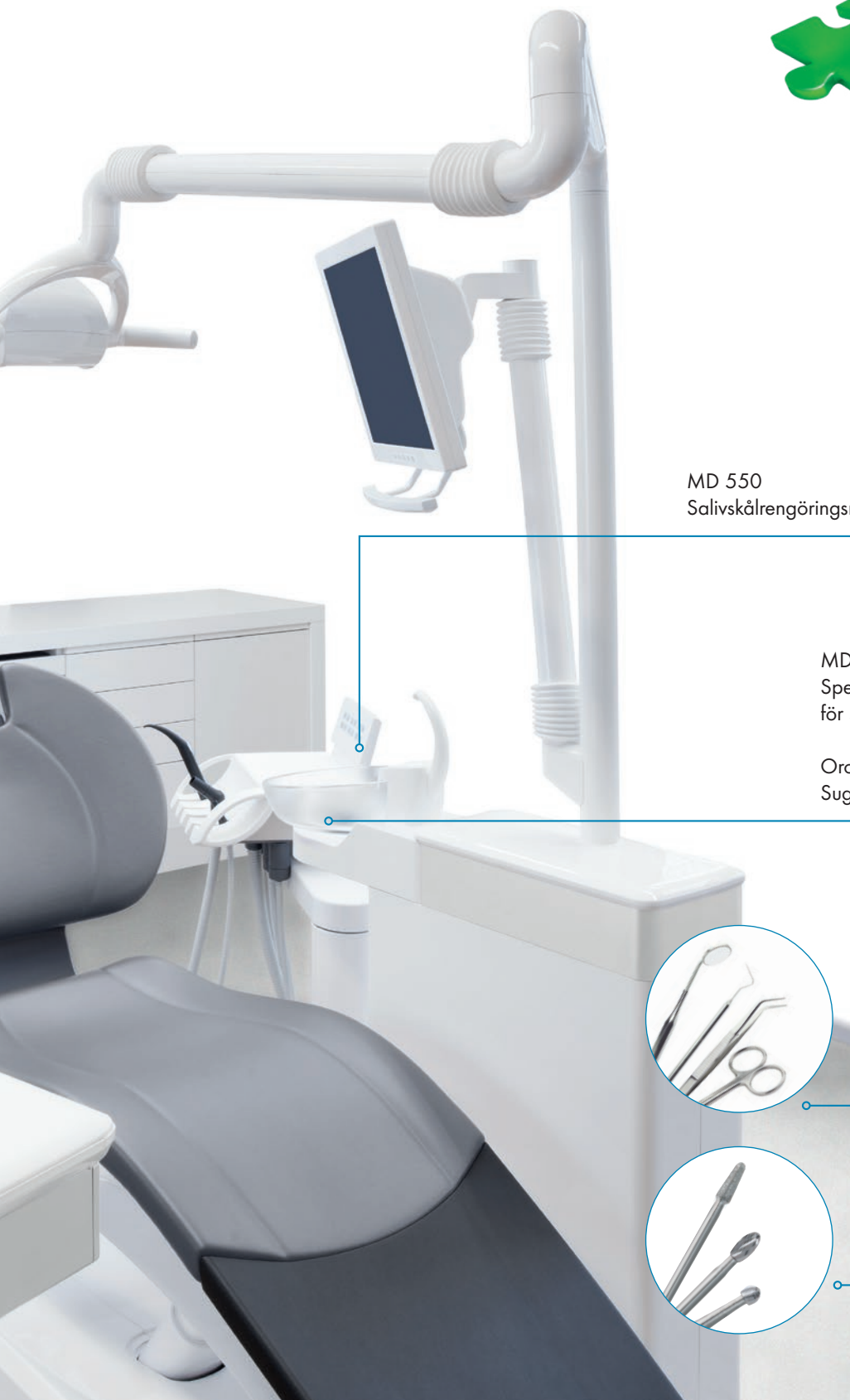

MD 550  
Salivskållrengöringsmedel



MD 555 cleaner  
Specialrengöringsmedel  
för sugsystem



Orotol® plus  
Sugsystemsdesinfektion



ID 212 eller ID 213  
Instrumentdesinfektion



ID 220  
Borrdesinfektion



# Dürr Dental Hygienteknik – för maximal effektivitet i hygienkretsloppet

Sedan mer än 75 år står Dürr Dental för banbrytande utveckling inom medicinsk teknik – Made in Germany. Tack vare denna höga ambitionsnivå och målet att systematiskt fullända vårt utbud inom hygienteknik har vi idag en mängd innovativa och tekniska systemlösningar att erbjuda.

Användning

Manuell rengöring  
och desinfektion

Manuell beredning  
i rengörings- och desinfek-  
tionsapparat

Funktionskontroll /  
kontroll och instrumentvård

Sterilförpackning  
med Hygopac View  
och Hygofol



Dessa förenklar och effektiviserar de dagliga hygien- och rengöringsuppgifterna i en tandläkarmottagning och ger bästa möjliga resultat. Till Dürr Dental Systemhygien finns med andra ord perfekta komplement.

Ångsterilisering  
i Hygoclave 90

Dokumentation

Lagring





## Desinfektion och rengöring Instrument och borrar

### ■ ID 212 Instrument-desinfektion

Koncentrat för rengöring och desinfektion av instrument med optimal materialkompatibilitet



- Baktericid inkl. tb, levurocid, begränsat virucid och okapslade Adeno-virus och Noro-virus
- Lämplig för allmänna kirurgiska och roterande instrument
- Extra kort verkningstid vid behandling i ultraljudsbad
- Mycket skonsam mot material i instrument med gummi-/silikonandel

**Verksamma ämnen:** Kväterära ammoniumföreningar

**Finns som:** 2,5 l

**Vår rekommendation:** Hygasonic, Hygobox

### ■ ID 212 forte Instrument-desinfektion

Koncentrat för rengöring och desinfektion av instrument med kort verkningstid i ultraljudsbad



- Baktericid inkl. tb, levurocid, begränsat virucid och okapslade Adeno-virus och Noro-virus
- Lämplig för allmänna kirurgiska och roterande instrument
- Högt korrosionsskydd och lång hållbarhetstid på 7 dagar
- Ytterst snabb desinfektion och rengöring i ultraljudsbad

**Verksamma ämnen:** Alkylamin, kväterära ammoniumföreningar

**Finns som:** 2,5 l

**Vår rekommendation:** Hygasonic, Hygobox

### ■ ID 213 Instrument-desinfektion

Helt antiviralt koncentrat för rengöring och desinfektion av allmänna kirurgiska och roterande instrument



- Baktericid inkl. tb, fungicid, virucid (kontrollerad enligt EN 14476)
- Utomordentlig rengöringsverkan - löser hårt sittande smuts
- Särskilt ekonomisk genom lång hållbarhetstid på 14 dagar
- Mycket skonsam mot material genom korrosionsskyddande ämnen

**Verksamma ämnen:** Alkylamin, kväterära ammoniumföreningar

**Finns som:** 2,5 l

**Vår rekommendation:** Hygasonic, Hygobox

### ■ ID 215 Enzymatiskt instrumentrengöringsmedel

Koncentrat för manuell, enzymatisk rengöring av instrument före desinfektion



- Baktericid, levurocid, begränsat virucid
- Skyddar personal genom mikrobicid verkan
- Utomordentlig rengöringsverkan - löser hårt sittande smuts
- Mycket skonsam mot material

**Verksamma ämnen:** Kväterära ammoniumföreningar, guanidföreningar

**Finns som:** 2,5 l

**Vår rekommendation:** Hygasonic, Hygobox, borrarbehållare

### ■ ID 220 Borr-desinfektion

Helt virucid, bruksfärdig lösning för rengöring och desinfektion av roterande instrument



- Baktericid inkl. tb, fungicid, virucid (kontrollerad enligt DVV/RKI och EN 14476)
- Stor rengöringskraft speciellt för fina strukturer på borrar och fräsar
- Högt korrosionsskydd och lång hållbarhetstid på 7 dagar
- Mycket korta verkningstider

**Verksamma ämnen:** Alkoholer i alkalisk miljö

**Finns som:** 2,5 l

**Vår rekommendation:** Hygasonic, borrarbehållare





## Apparater och tillbehör

### Hygobox

Robust, stabil transport- och desinfektionsbox som rymmer upp till 3 liter



- Ergonomiskt formade handtag för säker transport
- Tippsäker dropposition för den integrerade silinsatsen
- Instrumenten fastnar inte tack vare hålslitsar med speciell form

**Mått (HxBxD):** 13 × 32,5 × 21 cm

**Färgvarianter:** Antracitfärgat lock med blå eller gul insats, lock finns i fem olika färger med vit insats

**Vår rekommendation:** ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 215, MD 520, MD 535

### ID 220 borrhox

Autoklaverbar desinfektionsbox för roterande instrument



- med lock och silinsats
- av robust plast
- Autoklaverbar upp till 121 °C

**Mått:** Höjd 8 cm, Ø: 8,8 cm

**Kapacitet:** 200 ml

### Hygosonic

Uppvärmbart ultraljudsbad för noggrann rengöring av instrument, borrhox, proteser osv. Dessutom kan instrumenten desinficeras säkert genom användning av ID-produkterna.



- Effektiv desinfektion och rengöring som är skonsam för materialet
- Jämn rengöring genom ultraljudsoptimering
- Prestandaökning genom "boostfunktion"
- Syreborttagning i lösningar genom "avgasningsfunktion"

**Mått (HxBxD):** 21,4 × 30 × 17,9 cm

**Trågvolymer:** 2,75 liter

**Tillbehör:** lock, glas, insats-/instrumentkorg

**Vår rekommendation:** ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 215, ID 220, MD 530, MD 535

### Hygopac

Foliesvets för transparenta sterilförpackningar



- Optimalt kontrakttryck för stabil kvalitet på förseglingssömmen.
- Löpbandprincipen möjliggör ett snabbt och rationellt arbete
- Steglös temperaturreglering för optimal försegling

**Mått (HxBxD):** 16,0 × 43,5 × 13,5 cm

**Vår rekommendation:** Hygofol-påse, Hygofol-rullar

### Hygopac View

Validerbar foliesvets för normanpassad försegling av sterilförpackningar motsvarande DIN EN ISO 11607-2.



- Extremt kompakt design för minimalt platsbehov
- Intuitivt manöverkoncept via pekskärm
- Processdokumentation genom lagring på SD-kort och nätverksanslutning

**Mått (HxBxD):** 17,0 × 37,0 × 14,0 cm

**Vår rekommendation:** Hygofol-påse, Hygofol-rullar, instrumentbord, Hygofol-station



## Apparater och tillbehör

### Hygoclave 90

Ångsterilisator klass B motsvarande EN 13060 med innovativ DuraSteam-teknologi. Avgörande egenskaper hos Hygoclave 90 är driftsäkerheten och de imponerande snabba cykeltiderna tillsammans med den höga energieffektiviteten. Detta uppnås genom en perfekt kombination och ett störningsfritt samspel mellan ångkondensator, vakuumpump med

tre kolvar, värmerör, påsvetsade ventiläten och kraftfull värmeeffekt på 2400 Watt. Lägg till detta en fantastisk användnings- och underhållskomfort samt en konstruktion helt i rostfritt stål som bibehåller instrumentens värde, så är det tydligt att detta är ett nytt steg i utvecklingen.



- En av de snabbaste steriliseringscyklerna (universalprogram 134 °C/5,5 min. från 12 min.)
- Låg vatten- och energiförbrukning
- Stor lastkapacitet (upp till 10 kg vid användning av sterila behållare)
- Hög steriliseringsssäkerhet tack vare djupt och snabbt uppbyggt vakuum (hög kondenseringshastighet)
- Frigivning inkl. alla relevanta parametrar direkt på aggregatet med en underskrift
- Direkt lagring av protokoll som PDF utan anslutning till dator möjlig
- Anslutning till Tyscor Pulse och alternativ från andra tillverkare
- Enkelt och snabbt underhåll
- Hållaren kan utrustas med upp till 6 brickor eller vridas 90° - 2 standardbrickor för kassetter och 1 steril behållare (höjd 65 mm).

Mått (HxBxD): 47,5 x 54 x 52 cm



### Hygotest

Helix-prov kropp med 250 testremсор för regelbundet, snabbt och enkelt Helix-test.



- Motsvarande EN 867-5 och ISO 11140-1
- PCD (Process Challenge Device) och 250 indikatorer
- Kan användas som laddningskontrollsystem och Bowie-Dick-test
- Startsat med 50 indikatorer medföljer vid första leverans av autoklav

### Hygofol

Steriliseringsförpackningen Hygofol med dess laminatfolie i flera skikt och extra slitåligt steriliseringspapper ger högsta möjliga säkerhet



- Hög trycktålighet och utmärkt mekanisk hållfasthet
- Hög draghållfasthet för förseglingen
- Hygofol som praktiska, förberedda påsar i 3 storlekar
- Hygofol för individuell utformning på rullar i 5 storlekar

Mått:

Hygofol-påse (BxL): 7,5 cm, 10 cm eller 15 cm x resp. 30 cm

Hygofol-rullar (BxL): 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm eller 25 cm x 100 m vardera

\* Testat med sterilcontainer av aluminium och två permanenta filter (en i locket och en i golvplattan). Vikt inklusive steril container och tillhörande insatser.



### ■ Hygoprint Plus

Automatisk etikettskrivare för sterilförpackningar gör att programspecifika etiketter kan skrivas ut direkt.



- Flexibelt placerbar tack vare Ethernet-anslutning
- Etikettstorlek motsvarande riktlinjer – montering utanför förseglingen möjlig
- Streckkod för inskanning till digital datahantering
- Etikettuppgifter: Aggregat (REF och serienummer), program, LOT-datum, användare (som gjort frigivning), förfalldatum

**Mått (HxBxD):** 17,5 x 12,5 x 24 cm

**Vår rekommendation:** Hygoprint Plus etiketter och tonerullar

### ■ Hygoclave 30 och Hygopure 30

Hygoclave 30 – Enkel användning, mycket snabbt, helt enkelt pålitligt, Hygopure 30 – Trestegs vändbart osmossystem med aktivt kolförfilter, osmosmembran och slutligen ett avjoniserande filter ger optimalt tillrett vatten för steriliseringsprocessen.



- Kort uppvärmningsfas tack vare specialanpassat materialval
- Snabba cykeltider på ner till 20 min inkl. torkning
- Integrerad kvalitetskontroll av färskvatten
- Direktuppvärmda brickor för optimal torkning

### ■ Hygoprint

System för märkning av sterilförpackningar.



- Snabb och enkel dokumentation av steriliseringsprocessen
- Fullständig märkning med alla relevanta data
- Lätt och enkel att hantera

**Vår rekommendation:** Enkel- eller dubbelhäftande etiketter, dokumentationsblock med 100 blad, extra färgulle

### ■ Hygodem 90

Hygodem 90 står för hög kvalitet som komprimerats i ett kompakt aggregat. Jonväxlingsanläggningen tillreder kranvatten i tre patroner och kan anslutas direkt till Hygoclave 90 i trånga utrymmen.



- Jonväxlingsanläggning
- Komfortabel tack vare 3 jonväxlingspatroner
- Enkelt underhåll tack vare avluftningsventil
- Enkel montering tack vare snabbkopplingar
- Litet platsbehov
- Lågt inköpspris

**Vår rekommendation:** Patronatsats för Hygodem 90

### ■ Hygopure 90

När Hygoclave 90 belastas maximalt i den hårda vardagsdriften på en mottagning behöver den en stark och pålitlig partner: Hygopure 90 har hög kapacitet och gör att stora mängder (flera liter) avjoniserat vatten kan utvinnas på en och samma gång.



- Vändbar osmosanläggning inkl. avtappningskran och lagringsbehållare
- Flera filtersteg + högverkande membran med serviceventil för kontroll av verkningsgrad
- Enkel installation tack vare snabbkopplingar
- Hög kapacitet
- Flera liter avjoniserat vatten kan utvinnas på en gång
- eco-modulen gör att upp till 70 % vatten kan sparas

**Vår rekommendation:** Patronatsats för Hygopure 90, membran DF50 för Hygopure 90, avtappningskran i rostfritt stål för Hygopure 90, kontrollvärdesmätare HMEC1, Agua-Stop-ventil LD1



## Desinfektion och rengöring

### Ytdesinfektion\*

#### ■ FD 300 Ytdesinfektion

Helt antiviralt och alkoholfritt koncentrat för desinfektion av ytor på medicinska produkter



- Baktericid inkl. tb, levurocid, virucid (kontrollerad enligt DVV/RKI och EN 14476)
- Extra kort verkningstid
- Hög materialkompatibilitet

**Verksamma ämnen:** Alkylamin, kvartära ammoniumföreningar

**Finns som:** 2,5 l

**Vår rekommendation:** FD 370 cleaner, FD multi wipes, FD multi wipes compact

#### ■ FD 312 Ytdesinfektion\*

Alkoholfritt koncentrat för desinfektion av ytor och föremål



- Baktericid, levurocid, begränsat virucid PLUS (kapslade virus och Adeno-virus och Noro-virus)
- Ekonomisk användning: upp till 250 liter bruksfärdig lösning vid 1 %
- Kontrollerad materialkompatibilitet
- Extra behaglig doft

**Verksamma ämnen:** Kvartära ammoniumföreningar

**Finns som:** 2,5 l

**Vår rekommendation:** FD 370 cleaner, FD multi wipes, FD multi wipes compact

#### ■ FD 370 cleaner Rengöringsmedel för läkarmottagningar

Koncentrat för desinfektion av ytor och föremål



- Effektivt rengöringsmedel för inventarier i mottagningen, apparater och golv
- Ingen neutralisering av desinfektionsverkan
- Rengjorda ytor klibbar inte eller missfärgas i kombination med desinfektionsmedel
- Mycket ekonomisk: Upp till 250 liter bruksfärdig lösning vid 1 %

**Innehåller:** Ickejoniska tensider

**Finns som:** 2,5 l

**Vår rekommendation:** FD 300, FD 312

## Snabbdesinfektion

#### ■ FD 322 Snabbdesinfektion

Snabbt verkande bruksfärdig lösning för desinfektion och rengöring av ytor på medicinska produkter och medicinska inventarier



- Baktericid, inkl. tb, levurocid, fungicid, begränsat virucid PLUS (kapslade virus och Adeno-virus och Noro-virus)
- Mycket kort verkningstid
- Torkar utan rester
- Kontrollerad materialkompatibilitet

**Verksamma ämnen:** Alkoholer

**FD 322 finns som:** 750 ml för Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l

**Vår rekommendation:** Spraymunstycke, 600 ml-sprayflaska, FD multi wipes, FD multi wipes compact

**FD 322 perfume free finns som:** 2,5 l, 10 l

**Vår rekommendation:** 600 ml-sprayflaska, FD multi wipes, FD multi wipes compact





### ■ FD 333 Snabbdesinfektion

Snabbverkande bruksfärdig lösning för snabbdesinfektion av ytor på medicinprodukter och medicinska inventarier



- Baktericid, inkl. tb, levurocid, fungicid, begränsat virucid PLUS (kapslade virus och Adeno-virus och Noro-virus)
- Mycket hög materialkompatibilitet
- Frisk citrondoft
- Torkar snabbt

**Verksamma ämnen:** Alkohol, kvartära ammoniumföreningar

**Finns som:** 750 ml för Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l

**Vår rekommendation:** Spraymunstycke, 600 ml-sprayflaska, FD multi wipes, FD multi wipes compact

### ■ FD 333 forte Snabbdesinfektion

Helt bruksfärdig lösning för snabbdesinfektion och rengöring av ytor på medicinprodukter och medicinska inventarier



- Baktericid, mykobaktericid inkl. tb, levurocid, fungicid, virucid (kontrollerad enligt DVV/RKI och EN 14476)
- Hög materialkompatibilitet
- Frisk citrondoft
- Torkar snabbt

**Verksamma ämnen:** Alkohol, kvartära ammoniumföreningar

**Finns som:** 1 l, 2,5 l, 10 l

**Vår rekommendation:** Spraymunstycke, 600 ml-sprayflaska, FD multi wipes, FD multi wipes compact

### ■ FD 366 sensitive Desinfektion av känsliga ytor

Alkoholreducerad bruksfärdig lösning för desinfektion och rengöring av särskilt känsliga ytor på medicinska produkter



- Baktericid inkl. tb, levurocid, begränsat virucid och okapslade Noro-virus
- Snabb desinfektionsverkan
- Vid behandlingsenheter idealisk i kombination med FD 360 konstläderrengöring
- Kontrollerad materialkompatibilitet - rekommenderas av ledande enhetstillverkare

**Verksamma ämnen:** Alkohol, kvartära ammoniumföreningar

**Finns som:** 750 ml för Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l

**Vår rekommendation:** Spraymunstycke, 600 ml-sprayflaska, FD multi wipes, FD multi wipes compact

## Vård

### ■ FD 360 Rengöring och vård av konstläder

Rengöringsvätska för djupverkande rengöring och skötsel av konstläderytor



- Rengöringsmedel kombinerat med medel för att förlänga utrustningens livslängd som är skonsamt mot materialet
- Intensiv rengöringsverkan - tar bort fläckar av alla slag, ränder och missfärgningar
- Kontrollerad materialkompatibilitet - rekommenderas av ledande enhetstillverkare
- Idealisk för behandlingsenheter i kombination med FD 366 sensitive

**Innehåller:** Specialtensider, silikonföreningar och avokadoolja som bas

**Finns som:** Sats med 500 ml sprayflaska, en FD polerduk och nio specialsvarpar

**Vår rekommendation:** FD 366 sensitive, FD 366 sensitive wipes, FD polerduk

# Desinfektionsdukar för ytor

## Alkohol fria desinfektionsservetter



### ■ FD 300 top wipes Ytdesinfektion\*

Fullt virucida och alkoholfria desinfektions- och rengöringsdukar för ytor på medicinska produkter



- Baktericid inkl. tb, fungicid, virucid (kontrollerad enligt EN 14476)
- Extra kort verkningstid
- Smidig uttagning ur förpackning med låsklämma
- Gripstruktur för snabb hantering

**Verksamma ämnen:** Alkylamin, kvartära ammoniumföreningar

**Finns som:** Förpackning med 50 dukar

**Dukstorlek:** 17,5 x 25 cm

### ■ FD 312 wet wipes\* Ytdesinfektion

Alkoholfria desinfektions- och rengöringsdukar för stora ytor



- Baktericid, levurocid, begränsat virucid
- Mycket dryg, klarar att fukta ytor upp till 8 m<sup>2</sup>
- Dukar med slittålig struktur
- Med frisk doft

**Verksamma ämnen:** Kvartära ammoniumföreningar

**Finns som:** Förpackning med 15 dukar

**Dukstorlek:** 22 x 42 cm

## Alkoholiska desinfektionsservetter

### ■ FD 322 premium wipes snabbdesinfektion, FD 322 top wipes snabbdesinfektion

Snabbverkande desinfektions- och rengöringsdukar med alkohol för mindre ytor på medicinska produkter



- Baktericid, inkl. tb, levurocid, fungicid, begränsat virucid PLUS (kapslade virus och Adeno-virus och Noro-virus)
- Mycket kort verkningstid
- Torkar utan rester
- Kontrollerad materialkompatibilitet

**Verksamma ämnen:** Alkoholer

**FD 322 premium wipes**

**Finns som:** Dispenserburk med 80 dukar

**Dukstorlek:** 14 x 19 cm

**FD 322 top wipes**

**Finns som:** Förpackning med 50 dukar

**Dukstorlek:** 17,5 x 25 cm

### ■ FD 333 wipes snabbdesinfektion, FD 333 top wipes snabbdesinfektion

Bruksfärdiga desinfektions- och rengöringsdukar med alkohol för mindre ytor på medicinska produkter



- Baktericid, inkl. tb, levurocid, fungicid, begränsat virucid PLUS (kapslade virus och Adeno-virus och Noro-virus)
- Snabb desinfektionsverkan
- Torkar snabbt
- Parfymfria

**Verksamma ämnen:** Alkoholer, kvartära ammoniumföreningar

**FD 333 wipes**

**Finns som:**

Dispenserburk med 110 dukar

**Dukstorlek:** 14 x 22 cm

**FD 333 top wipes**

**Finns som:**

Förpackning med 50 dukar

**Dukstorlek:** 17,5 x 25 cm

**NYHET**

### ■ FD 333 forte premium wipes snabbdesinfektion, FD 333 forte wipes snabbdesinfektion

Fullt virusdödande bruksfärdiga desinfektions- och rengöringsdukar för ytor på medicintekniska produkter och medicinska inventarier

Kontrollerad enligt DVV/RKI och EN 14476



- Baktericid, mykobaktericid inkl. tb, fungicid, virucid (kontrollerad enligt DVV/RKI och EN 14476)
- Snabb desinfektionsverkan
- Extra stora dukar
- Frisk citrondoft

**Verksamma ämnen:** Alkoholer, kvartära ammoniumföreningar

**FD 333 forte premium wipes**

**Finns som:**

Dispenserburk med 80 dukar

**Dukstorlek:** 14 x 19 cm

**FD 333 forte dukar**

**Finns som:**

Dispenserburk med 100 dukar

**Dukstorlek:** 20 x 30 cm

### ■ FD 350 Desinfektionsservetter

Snabbverkande desinfektions- och rengöringsdukar med alkohol för mindre ytor på medicinska produkter



- Baktericid, inkl. tb, levurocid, fungicid, begränsat virucid PLUS (kapslade virus och Adeno-virus och Noro-virus)
- Snabb desinfektionsverkan
- Torkar utan rester
- Tre olika dofttyper: Classic, Blommor, Citron

**Verksamma ämnen:** Alkohol

**Finns som:** Dispenserbuk med 110 dukar

**Dukstorlek:** 14 x 22 cm



### ■ FD 366 sensitive wipes för desinfektion av känsliga ytor, FD 366 sensitive top wipes för desinfektion av känsliga ytor

Bruksfärdiga desinfektions- och rengöringsdukar för känsliga ytor på medicinska produkter



- Baktericid, tuberkoloid, levurocid, begränsat virucid och okapslade Noro-virus
- Snabb desinfektionsverkan
- Extra stora dukar
- Parfymfria

**Verksamma ämnen:** Alkohol, kvartära ammoniumföreningar

**FD 366 sensitive dukar**

**Finns som:**

Dispenserbuk med 100 dukar

**Dukstorlek:** 20 x 30 cm

**FD 366 sensitive top wipes**

**Finns som:**

Förpackning med 50 dukar

**Dukstorlek:** 17,5 x 25 cm

## Torra dukar

### ■ FD multi wipes

Universella, torra dukar, kan fuktas in med desinfektions- och rengöringsmedel



- Universellt användbara dukar i kombination med ytdesinfektionsmedel
- Luddfria och rivtåliga
- Fuktar mycket väl och repar inte ytor
- Mycket ekonomiska

**Finns som:** Dispenserbuk med 180 dukar

**Dukstorlek:** 20 x 30 cm

**Vår rekommendation:** FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 333 forte, FD 366 sensitive, väggfäste för FD multi wipes-box

### ■ FD multi wipes compact

Universella, torra dukar, kan fuktas in med desinfektions- och rengöringsmedel



- Universellt användbara dukar i kombination med ytdesinfektionsmedel
- Luddfria och rivtåliga
- Fuktar mycket väl och repar inte ytor
- Kompakt låda, extra stora dukar

**Finns som:** Dispenserbuk med 60 dukar

**Dukstorlek:** 29 x 30 cm

**Vår rekommendation:** FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 333 forte, FD 366 sensitive

### ■ FD Polerduk

Mikrofiberduk med specialfiber för materialsksam rengöring och polering av känsliga ytor



- Extra grundligt tack vare fin fiberväv
- Snabb polering som inte lämnar spår
- Avlägsnar små smuts- och dammpartiklar tack vare antistatiska egenskaper
- Kan tvättas utan problem i upp till 60 °C

**Finns som:** Enstaka duk

**Dukstorlek:** 32 x 32 cm

# Hud och händer



## Desinfektion och rengöring Handdesinfektion

### ■ HD 410\* Handdesinfektion

Alkoholhaltigt medel som gnids in i huden och som används för hygienisk och kirurgisk desinfektion av händer



- Baktericid inkl. tb, levurocid, begränsat virucid och okapslade Adeno-virus, Noro-virus och Rota-virus
- Ytterst snabb: Hygienisk handdesinfektion 15 sekunder/kirurgisk handdesinfektion 90 sekunder
- Behaglig hudkänsla genom återfettning
- Parfymfria

**Verksamma ämnen:** Alkoholer

**Finns som:** 500 ml, 500 ml för Hygocare Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l

**Vår rekommendation:** Universal-preparatdispenser S 400, L 400, L 1000, Touchless T 400, T 1000, RX 5M, RX 5T, doseringspumpar

## Handrengöring

### ■ HD 425 Tvättlotion

Mild tvättlotion för att tvätta hud och händer



- Dermatologiskt kontrollerad – mycket skonsam
- Innehåller hudvårdande och återfettande ämnen
- Idealiskt kombipreparat för handdesinfektion HD 410 med alkohol

**Innehåller:** Rengöringsaktiva tensider och vårdande komponenter som Allantoin

**Finns som:** 500 ml

**Vår rekommendation:** HD 410, HD 440

### ■ HD 435 Tvättlotion

Mild tvättlotion med hudtypiskt pH-värde för att bevara den naturliga hudfloran



- Intensivt rengörande tack vare utvalda aktivt tvättande komponenter
- Innehåller hudvårdande och återfettande ämnen samt faktorer som behåller hudens fuktighet
- Idealiskt kombipreparat för handdesinfektion HD 410 med alkohol

**Innehåller:** Rengöringsaktiva tensider, Allantoin

**Finns som:** 500 ml, 1 l, 2,5 l

**Vår rekommendation:** Universal-preparatdispenser S 400, L 400, L 1000, Touchless T 400, T 1000, RX 5M, RX 5T, doseringspumpar, HD 410, HD 440

## Vård

### ■ HD 440 Lotion

Lotion för utsatt och känslig hud



- Skyddar, vårdar och förebygger inflammationer
- Förhindrar att huden torkar ut
- Beprövade innehållsämnen bevarar händernas smidighet
- Inte fet – dras snabbt in i huden

**Innehåller:** Vårdande oljor, hamamelisextrakt, Allantoin

**Finns som:** 500 ml

**Vår rekommendation:** Universal-preparatdispenser S 400, L 400, Touchless T 400, RX 5M, RX 5T, doseringspump, HD 410, HD 412 essential, HD 425, HD 435





## Dispensersystem

### ■ Universal-preparatdispenser Touchless

Batteridrivnen sensordispenser för beröringsfri, hygienisk applicering av handpreparat



- Optimal handhygien genom beröringsfri användning
- Batteridrift med batteriindikering genom ljudsignal när batteribyte krävs
- Hög hygienstandard genom hölje av eloxerat aluminium
- Pump av rostfritt stål som kan autoklaveras eller engångspump

**Mått (BxHxD):** T 1000/T 400: 9,2 x 33,0 x 21,0 cm

**Finns som:** T 400 för 500 ml-flaska, T 1000 för 1 l-flaska

**Vår rekommendation:** HD 410, HD 435 i 500 ml-flaska eller 1 l-flaska, HD 440 i 500 ml-flaska, skållållare, bordsstativ, engångspumpar

### ■ Universal-preparatdispenser

Universal-preparatdispenser för väggmontering, för applicering av handpreparat



- Mycket enkel att hantera
- Finns med kort (S) eller lång (L) spak
- Hållbart utförande i aluminium och rostfritt stål
- Pump som kan autoklaveras eller engångspump

**Mått (BxHxD):** S 400/L 400: 8,2 x 24,5 x 8,2 cm, spaklängd: S: 16 cm, L: 21,5 cm/L 1000: 9,2 x 29 x 9 cm, spaklängd: 22,5 cm

**Finns som:** S 400 och L 400 för 500 ml-flaska, L 1000 för 1 l-flaska

**Vår rekommendation:** HD 410, HD 435 i 500 ml-flaska eller 1 l-flaska, HD 440 i 500 ml-flaska, engångspumpar

### ■ Universal-preparatdispenser RX

Manuell eller batteridrivnen universal-preparatdispenser för väggmontering, för applicering av handpreparat



- Manuell (RX 5M) eller beröringsfri (RX 5T)
- Hölje och uppsamlingskål av robust, vitt plast
- Enkelt pumpbyte frontuttagning

**Mått (BxHxD):** 10,2 x 27,0 x 14,2 cm

**Finns som:** RX 5M och RX 5T för 500 ml-flaska

**Vår rekommendation:** HD 410, HD 435, HD 440 i 500 ml-flaskan

**i** \*Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

# Specialområden

## Desinfektion och rengöring Sugsystem och fontänskål

### ■ Orotol® plus sugsystemsdesinfektion

Skumfritt flytande koncentrat för samtidig rengöring, desinficering, lukt borttagning, och skötsel av alla dentala sugsystem och amalgamavskiljare



- Baktericid, levurocid, begränsat virucid och okapslade Adeno-virus, Noro-virus
- Löser upp biofilm och förebygger slambildning från blod och proteiner
- Lösningen för förorenade sugsystem – ger säkert skydd mot infektioner
- Kontrollerad materialkompatibilitet – rekommenderas av ledande enhetstillverkare

**Verksamma ämnen:** Kvartära ammoniumföreningar

**Finns som:** 1 l, 2,5 l

**Vår rekommendation:** OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

### ■ Orotol® ultra sugsystemsdesinfektion

Koncentrat i pulverform för synkroniserad rengöring, desinfektion, lukt borttagning och skötsel av alla sugsystem och amalgamavskiljare



- Baktericid inkl. tb, sporicid (*Clostridium difficile*), levurocid, fungicid, virucid (testat enligt DVV/RKI och EN 14476)
- Löser upp biofilm och förebygger slambildning från blod och proteiner
- Låg användningskoncentration (1 %)
- Kontrollerad materialkompatibilitet – rekommenderas av ledande enhetstillverkare

**Verksamma ämnen:** Natriumperkarbonat

**Finns som:** 500 g-påse

**Vår rekommendation:** OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

### ■ MD 555 cleaner Specialrengöringsmedel för suganläggningar

Skumfritt rengöringskoncentrat för sugsystem och amalgamavskiljare av alla slag



- Löser beläggningar av kalk, profylaxpulver eller Pearl-produkter
- Mycket intensiv rengöringsverkan mot avlagringar och slambildning
- Kontrollerad materialkompatibilitet – rekommenderas av ledande enhetstillverkare
- Idealisk att kombinera med Orotol® plus

**Innehåller:** Organiska och oorganiska syror, skumfria tensider

**Finns som:** 2,5 l

**Vår rekommendation:** OroCup, Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 550

### ■ MD 550 Salivskållrengöringsmedel

Skumfri, bruksfärdig lösning för intensiv rengöring av fontänskålar



- Tar utan problem bort rester från kalk, blod eller plackfärgämnen
- Samtidig rengöring, lukt borttagning och skötsel av fontänskålar
- Utan repande komponenter – inga repor i fontänskålen
- Antimikrobiell – verksamt mot bakterier och svamp

**Verksamma ämnen:** Alkohol

**Finns som:** 750 ml

**Vår rekommendation:** Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 555 cleaner

### ■ OroCup Skötselsystem

Användarvänligt, slutet skötselsystem för desinfektion och rengöring av sugsystem och amalgamavskiljare



- Alstrar en blandning av luft och vatten som optimalt fuktar och effektivt rengör sugsystemet
- Rationellt arbete – ett system för blandning och genomsköljning av de bruksfärdiga lösningarna
- Anslutningsadapter för alla sugslangar

**Finns som:** 2 liter skötselsystem

**Vår rekommendation:** Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 555 cleaner



## Avtryck och tandtekniska arbeten

### ■ MD 530 Cementborttagningsmedel och protesrengöringsmedel

Bruksfärdig lösning för borttagning av cement, tandsten, rökläckor, oxidiskt osv. från proteser, bryggor, kronor, spatlar, glas m.m.



- Intensiv rengöringsverkan och fullständig borttagning av syralösliga beläggningar
- Kan användas direkt och är mycket skonsam mot material
- Särskilt snabb och effektiv genom specialrecept
- Innehåller korrosionsinhibitorer
- Lämplig för användning i ultraljudsbad

**Innehåller:** Oorganiska syror, tensider

**Finns som:** 2,5 l

**Vår rekommendation:** Hygobox, Hygasonic

### ■ MD 535 Gipsborttagare

Bruksfärdig lösning för borttagning av gips och alginat från avtrycksskedar och andra hjälpmedel



- Neutralt specialrengöringsmedel med särskilt snabb verkan
- Intensiv rengöringskraft för fullständig borttagning av gips och alginat
- Med aktivitetsindikator
- Lämplig för användning i ultraljudsbad

**Innehåller:** Alkaliska rengöringskomponenter och komplexbildare

**Finns som:** 2,5 l

**Vår rekommendation:** Hygobox, Hygasonic

### ■ MD 520 Avtrycks-desinfektion

Alkoholfri bruksfärdig lösning för effektiv och för materialet skonsam desinfektion och rengöring av avtryck, protetiska arbeten osv.



- Baktericid inkl. tb, levurocid, virucid (kontrollerad enligt EN 14476)
- Används för alginater, silikoner, polyeter, hydrokolloider, polysulfider osv.
- Ökad precision hos mastermodellen av gips genom effektiv rengöringsverkan
- Påverkar inte dimensionsstabiliteten eller gipskompabiliteten

**Verksamma ämnen:** Kvävtära ammoniumföreningar, glutardialdehyd

**Finns som:** 2,5 l, 10 l

**Vår rekommendation:** Desinfektionsburk, Hygobox, Hygojet

## Enhet

### ■ Hygojet

Desinfektions- och rengöringsluss för avtryck och protesarbeten



- Det slutna systemet förhindrar korskontaminering
- Sparsam vid användningen – endast 10 ml MD 520 per avtryck
- Mycket effektiv – 6 avtryck inom 12 minuter
- Kontrollerad desinfektionsmetod – dokumenterat genom expertutlåtande

**Mått (BxHxD):** 56 x 34 x 32 cm

**Vår rekommendation:** MD 520

# Verkan och användning

	Desinfektion	Rengöring	aldehydfri	biologiskt nedbrytbar	VAH-listad	IHO Desinfektionsmedelslista	testad enligt EU-standarder	4-fältest enligt VAH/EN 16615	baktericid	tuberkulocid	levurocid	fungicid	begränsat virucid	begränsat virucid plus	virucid	Användning	Verkningsstid enligt VAH i min.	Inverkanstid i min i ultraljudsbad	Förvaringsstid i dagar
<b>Instrument</b>																			
ID 212 Instrument-desinfektion	■	■	■	■	■	■	■		■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>		■			2%	5	5 <sup>10</sup>	7
ID 212 forte Instrument-desinfektion	■	■	■	■	■	■	■		■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>		■			2%	5	5 <sup>8</sup>	7
ID 213 Instrument-desinfektion	■	■	■	■	■	■	■		■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■		■ <sup>16</sup>	2%	5/60 <sup>7</sup>	1 <sup>9</sup>	14
ID 215 Enzymatiskt instrumentrengöringsmedel	■	■	■	■			■		■		■		■			1%/2%	30/15	15/1	
ID 220 Borr-desinfektion	■	■	■	■	■	■	■		■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■		■ <sup>15,16</sup>	utspädd	1 <sup>7</sup>	1 <sup>7</sup>	7
<b>Ytor</b>																			
FD 300 Ytdesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>		■	■	■ <sup>15,16</sup>	1%/2%	15 <sup>10</sup> /5		
FD 312 Ytdesinfektion <sup>1</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>		■ <sup>5</sup>		■	■		1%	15		
FD 370 cleaner Rengöringsmedel för läkarmottagningar		■	■	■												1%/2%			
FD 322 Snabbdesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■	■	utspädd	1 <sup>7</sup>		
FD 333 Snabbdesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■	■	utspädd	1 <sup>7</sup>		
FD 333 forte Snabbdesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■	■	utspädd	1 <sup>7</sup>		
FD 366 sensitive Desinfektion av känsliga ytor	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>		■			utspädd	1 <sup>11</sup>		
FD 300 top wipes Ytdesinfektion	■	■	■	■	■ <sup>17</sup>	■	■	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■	■	■ <sup>16</sup>	användningsklar	2 <sup>10</sup>		
FD 312 wet wipes Ytdesinfektion <sup>1</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>		■ <sup>5</sup>		■	■		användningsklar	15		
FD 322 premium wipes snabbdesinfektion/ FD 322 top wipes snabbdesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■	■		användningsklar	1 <sup>7</sup>		
FD 333 wipes Snabbdesinfektion FD 333 top wipes Snabbdesinfektion	■	■	■	■	■ <sup>17</sup>	■ <sup>17</sup>	■		■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■	■		användningsklar	1 <sup>7</sup>		
FD 333 forte premium wipes snabbdesinfektion, FD 333 forte wipes snabbdesinfektion	■	■	■	■	■ <sup>17</sup>	■	■	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■	■	■ <sup>15,16</sup>	användningsklar	1 <sup>7</sup>		
FD 360 Rengöring och vård av konstläder		■	■	■												användningsklar			
FD 350 Desinfektionsservetter	■	■	■	■	■	■	■		■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■	■		användningsklar	1 <sup>7</sup>		
FD 366 sensitive wipes Desinfektion av känsliga ytor	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>		■			användningsklar	1 <sup>11</sup>		
FD 366 sensitive top wipes Desinfektion av känsliga ytor	■	■	■	■	■	■ <sup>17</sup>	■	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>	■ <sup>5,6</sup>		■			användningsklar	1 <sup>11</sup>		
<b>Hud och händer</b>																			
HD 410 Handdesinfektion <sup>1, 2, 3</sup>	■		■	■	■	■	■		■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>6</sup>		■	■		utspädd	0,5/1,5 <sup>12,13</sup>		
HD 425 Tvättlotion <sup>4</sup>		■	■	■												utspädd			
HD 435 Tvättlotion <sup>4</sup>		■	■	■												utspädd			
HD 440 Lotion			■	■												utspädd			
<b>Specialområden</b>																			
Orotol® plus sugsystemsdesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>		■ <sup>5</sup>		■			2%	5/60		
Orotol® ultra sugsystemsdesinfektion	■	■	■	■	■	■	■		■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■		■ <sup>15,16</sup>	1%	5		
MD 555 cleaner Specialrengöringsmedel för sugsystem		■	■	■												5%	30-120		
MD 550 Salivskållrengöringsmedel		■	■	■		■	■		■ <sup>6</sup>		■ <sup>6</sup>					utspädd	ca 5		
MD 520 Avtrycks-desinfektion	■	■			■	■	■		■ <sup>5</sup>	■ <sup>6</sup>	■ <sup>5</sup>		■		■ <sup>15,16</sup>	utspädd	5/10 <sup>14</sup>		7
MD 530 Cementborttagningsmedel/protosrengöringsmedel		■	■	■												utspädd	max. 10	max. 10	
MD 535 Gipsborttagare		■	■	■												utspädd	e. beh.	e. beh.	

<sup>1</sup>Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs före användning alltid etiketten och produktinformationen. <sup>2</sup>återfettande <sup>3</sup>RKI-listat <sup>4</sup>hudvänligt pH-värde <sup>5</sup>hög belastning <sup>6</sup>liten belastning

<sup>7</sup>inkl. Tb-bakterier <sup>8</sup>för Tb-bakterier 4%/30 min. <sup>9</sup>för Tb-bakterier 2%/30 min. <sup>10</sup>för Tb-bakterier 60 min. <sup>11</sup>för Tb-bakterier 2 min. <sup>12</sup>för Tb-bakterier 30 sek.

<sup>13</sup>hygienisk handdesinfektion/kirurgisk handdesinfektion <sup>14</sup>im Hygojet <sup>15</sup>testad enligt DWV/RKI <sup>16</sup>testad enligt EN 14476 <sup>17</sup>verksam lösning